




# HISTO TYPE B27\*Q

## Real-time PCR pro onemocnění asociovaná s HLA


Kat. č. 728200 HISTO TYPE B\*27 Q (96 testů)



- Tekutý flexibilní formát
- 1 PCR mix zahrnuje:
  -  všechny B\*27 běžné (C) a CWD alely asociované s Morbus Bechterew
  -  B\*27:06, B\*27:09 neasociované s Morbus Bechterew
  -  interní pozitivní kontrolu
- Kompatibilní pro většinu běžně používaných RT cyklérů (validováno např. na Biorad CFX 96 a Roche Light Cycler® 480)
- Výsledky do 90 minut
- Lze použít široké rozmezí koncentrace DNA: 10 - 150 ng
- Využívá hot Start Polymerázu
- Bez gelové elektroforézy

### Využití 3 barev při odečtu výsledků:

- B\*27 negativní výsledek – pouze žlutá interní kontrola
- B\*27 pozitivní výsledek (všechny běžné + CWD alely asociované s M. Bechterew) – zelená a žlutá interní kontrola
- B\*27:06 / B\*27:09 pozitivní výsledek (není asociován s M. Bechterew) - červená

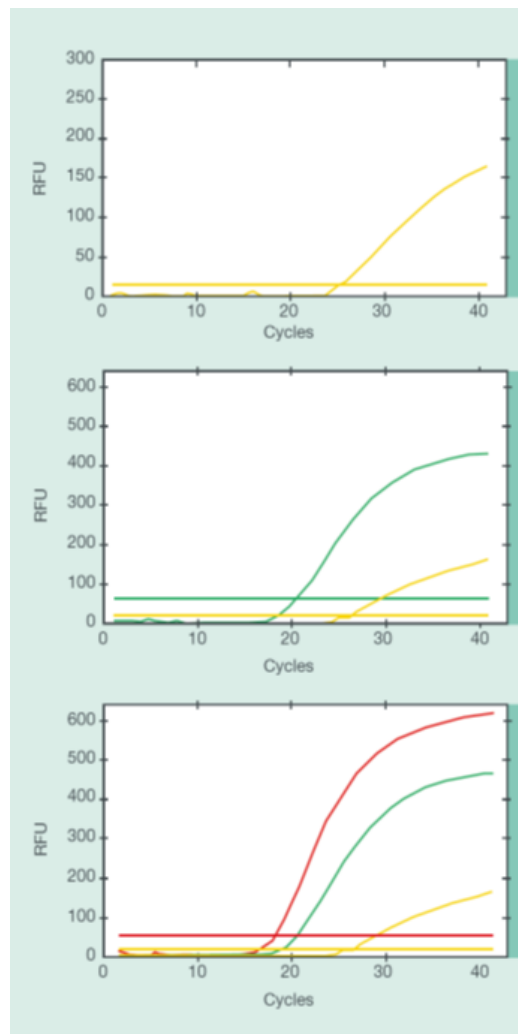

Kontakt na BAG Health Care GmbH pro ČR a SR: Na Hlinách 555/17, 182 00 Praha 8  
 Tel.: +420 286 840 508, +420 777 227 437, e-mail: [info@bag-healthcare.cz](mailto:info@bag-healthcare.cz), [www.bag-healthcare.cz](http://www.bag-healthcare.cz)